



Airwheel H8

IT MANUALE D'USO

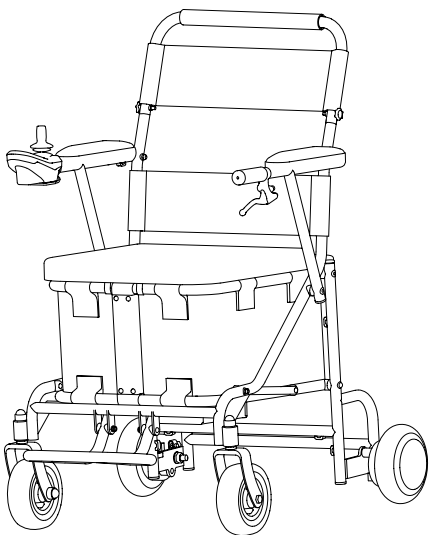


Diagramma

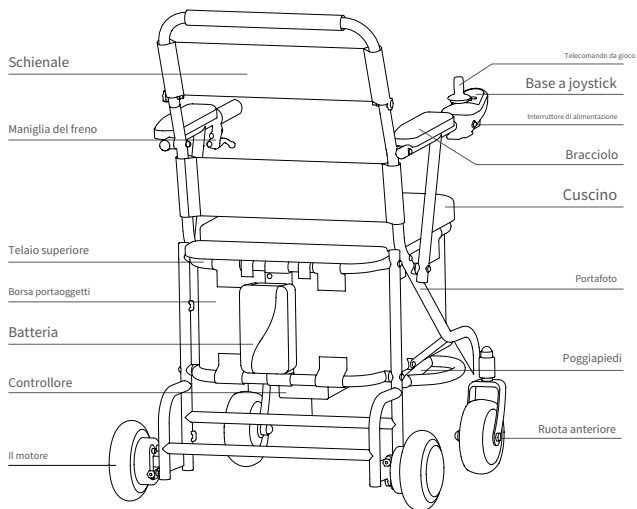

Lista imballaggio


Corpo della sedia a rotelle	1 unità	Caricabatterie	1 pz
Batteria	1 pz	Manuale d'uso/garanzia	1 pz
Traversa dello schienale	1 pz	Cuscino del sedile	1 pz
Borsa per accessori	1 pz		

Installazione e utilizzo

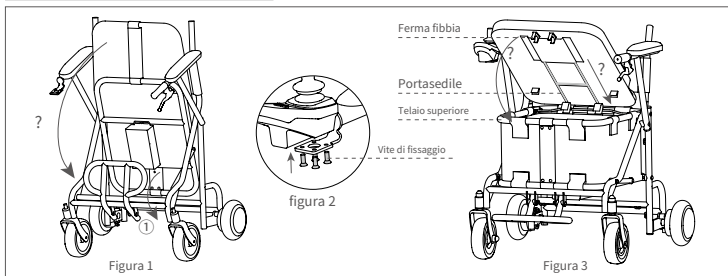

1 Prendi H8, cuscino e altri accessori dalla confezione. Per prima cosa aprire il poggipiedi (vedi Figura 1-①), quindi apri il corpo (vedi Figura 1-②). Allineare il foro della vite sotto la base del joystick con il foro di montaggio davanti al bracciolo, quindi serrare la vite di fissaggio per fissarlo (vedere la Figura 2).

2 Coprire il cuscino con il supporto del sedile (vedi Figura 3-③), regolarlo nella posizione adatta e chiudere i due pulsanti interni. Fissare il cuscino del sedile sul supporto del sedile e chiudere i due bottoni esterni, quindi fissare il cuscino del sedile sul telaio superiore. Appoggia il cuscino e usa il fermo della fibbia per fissare il telaio superiore (vedi Figura 3-? freccia).

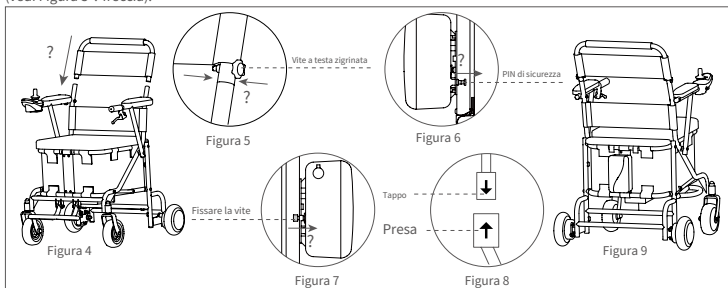


3 Inserire la traversa dello schienale nel corpo della carrozzina (vedi Figura 4-⑤) e utilizzare la vite a testa zigrinata per riparare (vedere la Figura 5-⑥).

4 Estrarre il perno di sicurezza (vedi Figura 6-⑦) e spingere la custodia della batteria lungo il perno di sicurezza per installare la batteria. Inserire il perno di sicurezza nella parte inferiore dei fori di montaggio della batteria e serrare la vite di fermo (vedere la Figura 7-⑧). Quindi installare la spina e la presa insieme (vedere la Figura 8).

Maniglia del freno

Tenere lentamente la maniglia del freno e la sedia a rotelle rallenterà. Quando è necessario parcheggiare a lungo, tenere saldamente la maniglia del freno e portare il freno di stazionamento nella posizione appropriata. Il freno verrà bloccato e la sedia a rotelle verrà fermata. Se vuoi ricominciare a usarlo, tieni la maniglia del freno e abbassa il freno di stazionamento per sbloccarlo.

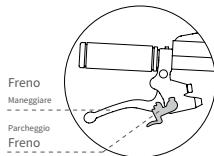

Specifiche

Principali parametri tecnici

Taglia del prodotto	858X630X1016mm	Peso dell'oggetto	~27kg
Dimensioni pieghevoli	534X630X1106mm	massimo caricare	130 kg
Raggio di rotazione	0,9 m	massimo velocità	6 Km/h
Tensione di carica	AC100-240V 50-60Hz	Il motore	Motore brushless a doppia trasmissione; Voltaggio: 36V;
Tempo di carica	~120 min	Potenza nominale	200W
Ruota anteriore	6 pollici, pneumatico	Velocità nominale	370±15 giri
Ruota posteriore	6,5 pollici, solido	Batteria	Litio 36V 162,8Wh
sovracorrente protezione	≤ 18A	Applicabile temperatura	- 15°C ~50°

Avvertimento


Si prega di non gettare la batteria di scarto, in caso di inquinamento ambientale. La batteria al litio di scarto del prodotto deve essere riciclata dall'impresa o dal rivenditore e dai punti vendita designati dal governo.

Istruzione

Come guidare H8

1. Il conducente deve allacciare la cintura di sicurezza dopo essersi seduto sul sedile.
2. Accendere l'alimentazione e un secondo dopo il LED di carica della batteria e il display della velocità saranno costantemente accesi.
3. Spingere lentamente il joystick in avanti e H8 si sposterà in avanti. Allo stesso modo, spingere o tirare il joystick indietro/a sinistra/a destra, la sedia a rotelle si sposterà indietro/a sinistra/a destra. (Nota: durante la guida, l'App dello smartphone non può controllarlo).
4. Regolare la velocità in base alle condizioni della strada, alle condizioni ambientali e alle preferenze personali.
5. Quando si desidera frenare o fermarsi, rilasciare il joystick e si girerà in posizione centrale. Tenere la leva del freno lentamente per farlo fermare in modo stabile (quando il joystick si gira in posizione centrale, H8 sarà in modalità standby dopo un secondo).
6. Prestare attenzione alle condizioni ambientali quando ci si sposta all'indietro. Tirare lentamente il joystick e la sedia a rotelle si sposterà all'indietro.
7. Dopo che H8 è entrato in modalità standby, i motociclisti possono collegare lo smartphone tramite l'app e il controllo avviene tramite l'app. (nota: se il joystick funziona, uscirà dalla modalità di controllo dell'app).

Istruzioni per il joystick

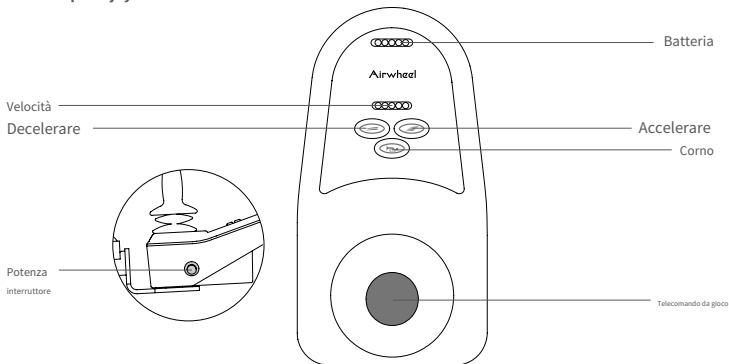

● Interruttore di alimentazione

Controllare l'alimentazione della carrozzina.
Quando viene premuto, la carrozzina è alimentata.
Quando viene rilasciato, è senza alimentazione.

● Pulsante clacson

Premere il pulsante il cicalino suonerà; Rilascia il pulsante, il cicalino smette di suonare.

● Pulsante Accelera/Decelera

Premere a turno il pulsante di accelerazione e la velocità aumenterà di 5 marce. Premere a turno il pulsante di decelerazione e la velocità diminuirà di 5 marce.

● Indicatore di velocità

Premere il pulsante di accelerazione e l'indicatore di velocità si illuminerà da sinistra a destra di 5 marce. Premere il pulsante di decelerazione e l'indicatore di velocità si spegne da destra a sinistra di 5 marce.

● Display di potenza a LED a 5 scale


Quando la batteria è completamente carica, la spia della scala 5 è accesa e ciascuna scala rappresenta il 20% della carica. Quando è accesa solo la spia della scala 2, si consiglia di caricare la carrozzina, il che è migliore per la durata della batteria.

Quando è accesa solo la spia della scala 1, avverte che la batteria è in condizioni di bassa carica. In questo caso non è consentito l'uso continuativo della carrozzina; in caso contrario, la batteria continuerà a scaricarsi e verrà danneggiata.

Come usare il joystick


Controlla H8 per andare avanti, indietro e girare a sinistra ea destra e per accelerare, decelerare e frenare. Dopo aver aperto il pulsante di commutazione, spingere il joystick in avanti verticalmente e H8 si sposta in avanti. Più avanti, maggiore è la velocità. Rilasciare il joystick per rallentare e quando viene rilasciato completamente, il joystick viene ripristinato e H8 si ferma ed è in stato di frenata. Tirare il joystick all'indietro, H8 si sposta all'indietro, più indietro, maggiore è la velocità all'indietro.

Allo stesso modo, ruota il joystick a sinistra oa destra, H8 girerà a sinistra oa destra. Spingendo più a sinistra oa destra, maggiore sarà la velocità verso sinistra o destra. Rilasciarlo per rallentare e quando viene rilasciato completamente, il joystick viene ripristinato e H8 si ferma ed è in stato di frenata.

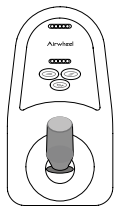


Inoltre

Spingi il joystick avanti con l'indice e H8 andrà avanti.

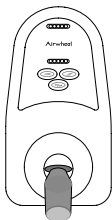


indietro

Spingi indietro il lato più gioioso con l'indice e H8 si sposterà indietro.

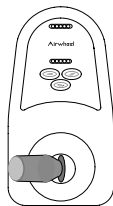

Verso sinistra

Spingi il joystick a sinistra con l'indice e H8 si sposterà a sinistra.

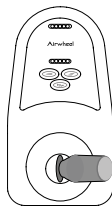

Verso destra

Spingere il segno di spunta verso destra con l'indice e H8 si sposterà a destra.

Operazione

Si prega di leggere questo capitolo il più attentamente possibile prima di utilizzare questo veicolo per la prima volta per comprendere appieno tutte le informazioni al fine di guidarlo in modo sicuro, comodo e libero, che è importante per te. In caso di domande, contattare il produttore.

Nota importante:

Hai bisogno di molta pratica per afferrare l'abilità prima di guidare l'H8 in sicurezza. Se non sei esperto o non segui la guida per l'utente di questo prodotto, potrebbe causare lesioni al pilota o ad altri o la perdita di proprietà. La nostra azienda si assume la responsabilità solo per difetti o danni del prodotto e NON siamo responsabili per lesioni fisiche o perdite di proprietà legate all'utilizzo dei prodotti

Attenzioni prima dell'operazione:

1. Acquisisci familiarità con le regole del traffico locale.
2. L'H8 appartiene a un veicolo non a motore e non richiede patente di guida in conformità con il codice della strada. Ma il conducente dovrebbe osservare le stesse regole del traffico applicate ai pedoni. Si prega di guidarlo su corsia pedonale o ciclabile.
(1)Acquisisci familiarità con tutti i segnali stradali utilizzati per i pedoni. (2)Non girare la direzione o attraversare la strada improvvisamente durante la guida su strada.
3. Pratica
Prima di utilizzare per la prima volta H8, familiarizzare con tutte le funzioni di questo veicolo. Esercitati in operazioni come andare avanti, indietro, aumentare la velocità, ridurre la velocità, fermarsi, spostarsi in salita, spostarsi in discesa e girare la direzione a un ritmo sicuro con meno persone e buone condizioni della strada. Quindi puoi guidare ufficialmente su strada dopo aver preso dimestichezza con tutte queste operazioni.
4. Se possibile, trova una persona che abbia familiarità con H8 che ti accompagni per garantire la tua sicurezza durante la prima operazione su strada.
5. Non guidare H8 dopo aver bevuto, essere esausti o incoscienti per garantire la propria sicurezza
6. Si prega di confermare che l'operatore di questo veicolo non è affetto da alcuna malattia mentale o altre malattie che potrebbero attaccare durante la guida e causare l'incapacità del conducente di guidare il veicolo in sicurezza.
7. Se sta assumendo medicinali, per favore confermi dal suo medico che se tale medicinale avrà un'influenza negativa sulla sua capacità di operare H8.
8. Controllare le condizioni del veicolo per confermare se il freno, le varie proprietà sono normali, la sella è fissa e la batteria è carica.
9. Non rimuovere la ruota antiribaltamento.
10. A causa dello spazio limitato, la normale pompa dell'aria non può essere utilizzata direttamente per pompare. Hai solo bisogno di collegare il tubo di prolunga gonfiabile all'ugello del pneumatico e utilizzare la normale pompa per pompare.
11. Non rimontare H8 senza la nostra autorizzazione.



Avvertimento

- In generale, la pressione dei pneumatici della ruota anteriore dell'H8 dovrebbe essere costante per garantire la stabilità della corsa; quando la pressione di due pneumatici è incoerente o ha anche una grande differenza, la sedia a rotelle si inclina su un lato, compromettendo la tua esperienza di guida o addirittura causando un incidente.
- Non esporre mai l'impianto elettrico di questo veicolo ad ambienti umidi (come pioggia, neve o nebbia), non lavare questo veicolo con acqua, che danneggerebbe l'impianto elettrico. Se il veicolo è bagnato, può essere utilizzato solo dopo essere stato asciugato e verificato in buone condizioni.
- Non guidarlo in condizioni meteorologiche ostili, come pioggia, neve, nebbia, vento forte, temperatura inferiore a -20 ° o superiore a 40 °C. L'impianto elettrico può essere danneggiato in quelle condizioni causando guasti nel controllo.
- Non guidarlo su deserti, spiagge, strade fangose, strade con pozze d'acqua, strade ghiacciate, strade troppo lisce o terreni salini e alcalini per evitare danni alle proprietà di guida di questo veicolo.

Attenzioni durante il funzionamento:

1. L'H8 è progettato con un solo sedile che non consente di prendere passeggeri
2. L'operatore deve sedersi sul sedile e controllarlo tramite joystick o app per smartphone.
3. Non guidare a zigzag, fare una svolta improvvisa ad alta velocità o inclinare il corpo per evitare che il veicolo si inclini su un lato.
4. Si prega di concentrarsi molto e di guidare lentamente su strade sconnesse o morbide (come i prati), quando si effettua una svolta, su strade molto trafficate, in centri commerciali o parchi.
5. Non utilizzare dispositivi di comunicazione wireless come telefoni cellulari durante la guida. Questi dispositivi possono essere utilizzati solo quando si ferma il veicolo in un luogo sicuro e si interrompe l'alimentazione.
6. Quando si procede all'indietro, prestare attenzione alle condizioni della strada e ai pedoni e guidare a bassa velocità.
7. Guidare a bassa velocità quando si esce dalla porta o dall'ascensore. Non è consentito sedersi su di essa sulle scale mobili.
8. Mantieni la massima concentrazione, allaccia le cinture e guida dritto a bassa velocità durante la guida in salita o in discesa.
9. Non consente di guidare H8 su pendii 5° quando dall'altra parte della strada ad alta velocità.
10. Non superare ostacoli o gradini eccessivamente alti e il pilota deve rilasciare il joystick.
11. Non attraversare l'ampio fossato. Quando si attraversa il piccolo fosso, si prega di rallentare.
12. Segui le regole del traffico quando guidi attraverso le strade trasversali e non correre con il semaforo rosso.
Quando si supera la ferrovia, fermarsi per osservare le condizioni circostanti, quindi attraversare la ferrovia lentamente in direzione perpendicolare ai binari per evitare di cadere nello spazio vuoto tra le diverse traversine.
13. Non accendere o spegnere frequentemente l'interruttore di alimentazione.
14. Non prestare H8 a chi non conosce o non ha mai utilizzato questo veicolo. Non lasciare che i bambini giochino con l'interruttore di alimentazione o il controller del manubrio.
15. Non utilizzare questo veicolo con un carico eccessivo (carico massimo 130 kg).



Avvertimento

Quando si rilascia il joystick durante la guida ed è tornato in posizione centrale, ma H8 non si ferma, spegnere immediatamente l'interruttore di alimentazione e contattare il produttore.

Attenzioni dopo l'operazione:

1. Dopo aver parcheggiato, quando non c'è nessuno su H8, spegnere l'alimentazione.
2. Se non utilizzerai H8 per oltre 48 ore, scollegare i cavi della batteria. (nota che rimuovendolo dalla presa si potrebbe scollegare l'alimentazione);
3. Quando porti H8 su altri veicoli, assicurati che la batteria sia fissa.

Utilizzo della batteria:

1. Carica ausiliaria: come tempi di consegna brevi, gli utenti possono utilizzare direttamente la batteria. Se il tempo di consegna è più lungo (2 mesi o più), la batteria perderà energia durante lo stoccaggio e il trasporto. È meglio caricare la batteria prima dell'uso. Per caricarlo è necessario collegare la carica esclusiva al foro di ricarica della batteria e collegare una fonte di alimentazione AC220V per 2 ~ 4 ore fino a quando il caricabatterie non è pieno.
2. Carica ordinaria: il funzionamento di H8 è anche il processo di scarica della batteria. La batteria deve essere caricata immediatamente dopo un lungo periodo di guida. Ricordarsi sempre di spegnere dopo l'uso.
3. Conservare sempre la batteria in un ambiente fresco e asciutto. Non immergerlo in acqua ed esporlo al sole e aprire il fuoco.
4. Non smontare e non decomporre la parte interna della batteria imballata intatta.
5. La batteria di scarto può essere riciclata. Riciclare o smaltire le batterie in conformità con le normative ambientali locali.

Utilizzo del caricatore:


1. Controllare attentamente se la tensione di ingresso nominale del caricabatterie (AC220V) e la tensione di rete sono coerenti.
2. Collegare il caricabatterie alla batteria prima di collegarlo a una presa CA dotata di messa a terra. Verificare che l'indicatore di carica si accenda (rosso) per confermare che si sta caricando. Quando diventa verde, ci vorranno 15 minuti per caricarsi completamente. Il tempo di ricarica è di circa 2 ore (a seconda della quantità di batteria residua).

Note di ricarica:

1. Durante la ricarica, tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
2. Si consiglia di utilizzarlo quando la batteria è completamente carica.
3. La batteria deve essere caricata con il caricabatterie applicabile a H8.
4. Non smontare il caricabatterie o la batteria, può essere pericoloso e invalidare la garanzia.
5. Impedire la penetrazione di liquidi e particelle metalliche all'interno e prestare attenzione alla caduta e all'urto in caso di danni durante l'uso e lo stoccaggio.
6. Quando si carica la batteria, non coprire la batteria o il caricabatterie.
7. Prima di riportarlo per lunghi periodi, assicurarsi che sia spento e completamente carico e caricarlo ogni 2 o 3 mesi.

Airwheel si riserva il diritto di interpretazione finale di tutti i termini e condizioni di questo Manuale Utente.

Per piegarlo

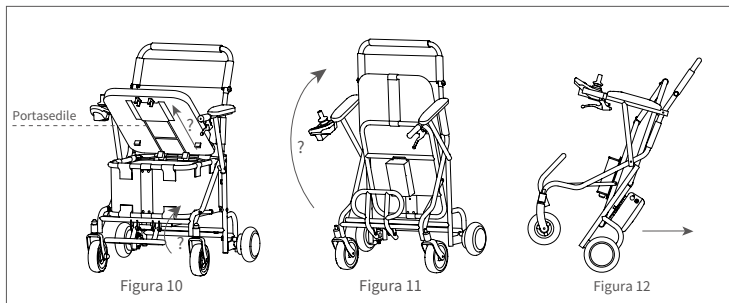

In modalità di spegnimento, aprire i quattro pulsanti di fissaggio del cuscino H8 dall'esterno verso l'interno e rimuovere il cuscino dal supporto del sedile (vedi Figura 10- ? freccia). Sollevare il poggiatesta (vedi Figura 10-? freccia), tenere il telaio superiore e piegare il corpo verso l'alto (vedi Figura 11- ? freccia). Dopo aver piegato, i ciclisti possono tirarlo per andare.

Download dell'app



Scansiona il codice QR per scaricarlo

* Applicabile ad Android 4.3 o versioni successive, iOS 7.0 o versioni successive.

Istruzioni APP

1. Accendi il pulsante di accensione H8 e avvia l'app e il Bluetooth.
2. Fare clic sul pulsante di ricerca e procedere come segue per connettersi (verificare che la password sia 11111111).
3. Fare riferimento al sito Web ufficiale o chiamare per i dettagli.




Fare clic sullo scooter intelligente nell'interfaccia dell'app.




clicka il pulsante di ricerca




Cerca Airwheel nelle vicinanze, fai clic sul modello Airwheel cercato per connetterti.

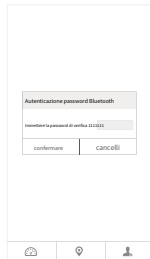

Immettere la password di verifica: 11111111 per connettersi.

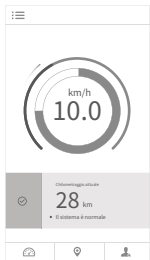

Fare clic sul pulsante dell'interfaccia principale per aprire la barra laterale.

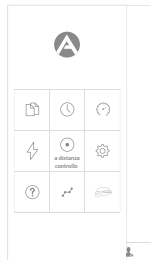

Clicca il pulsante nel barra laterale per aprire l'interfaccia del telecomando.




Sposta il pulsante operare lo scooter intelligente che va avanti, indietro o gira.



Far scorrere la velocità di controllo fare clic sull'icona per passare alla modalità di funzionamento manuale.


Altre istruzioni funzionali

- La scatola della batteria è sostituibile. Separare il cavo della scatola della batteria e la linea del telaio prima di rimuovere la scatola della batteria (per installare la batteria, inserire prima la scatola della batteria e quindi collegare).

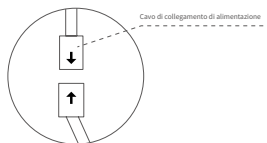

● 20 batterie

Per prima cosa allentare le viti di serraggio, tirare verso il basso il perno di sicurezza (come mostrato in figura), rimuovere il vano batteria nella direzione negativa del perno di sicurezza, quindi estrarre il vano batteria per caricare.

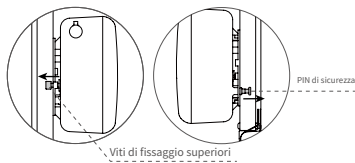

- Scoprire il cappuccio antipolvere nella scatola della batteria e collegare il caricabatterie per caricare.

